




GUEDEL AIRWAY

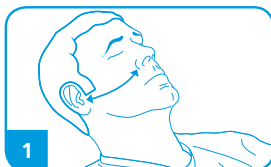

FR CANULES DE GUEDEL POUR VOIES
RESPIRATOIRES

DE GUEDEL-LUFTWEG

CZ VZDUCHOVOD GUEDEL

NL GUEDEL AIRWAY

IT CANNULA DI GUEDEL

PL RURKA GUEDELA

TR GUEDEL SOLUNUM YOLU

RU ВОЗДУХОВОД ГВЕДЕЛА

GR ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ GUEDEL

ES CÁNULA GUEDEL


PT TUBO OROFARÍNGEO

IN ALAT BANTU PERNAPASAN
GUEDEL

JP ゲデルエアウェイ

KO GUEDEL 기도기

RO CANULĂ GUEDEL

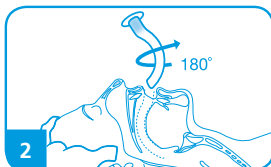

EN

The Flexicare Guedel Oropharyngeal Airway is intended to maintain an unconscious patient's airway by preventing the tongue falling backwards and the jaws from closing.

Do not use in conscious or semi-conscious patients when the gag reflex is present.

1. The suitable length of the Guedel Airway can be estimated by the distance from the patient's nostril to the earlobe, or the angle of the jaw.
2. With the patient in the supine position and the head and neck fully extended, apply a small amount of water soluble lubricant and insert the Guedel Airway into the patient's mouth upside down (inside curve facing the top of the patient's head).
3. When contact is made with the hard palate rotate the airway through 180° as it is advanced, ensuring the tongue is secured.

In paediatric patients the Guedel Airway may be inserted "right side up" to avoid pushing the tongue towards the pharynx.

CAUTION

- Remove when gag reflex returns.
- Suitable for use up to 24 hours.

FR

Les canules oropharyngées de Guedel pour voies respiratoires Flexicare sont prévues pour le maintien des voies respiratoires chez les patients inconscients en empêchant la chute de la langue en arrière et la fermeture de la mâchoire.

Ne pas utiliser chez les patients conscients ou à demi conscients, chez qui le réflexe nauséux est présent.

1. La longueur adéquate de la canule de Guedel pour voies respiratoires peut être estimée par la distance entre la narine et le lobe de l'oreille du patient, ou l'angle de la mâchoire.
2. Le patient étant en position couché allongé sur le dos avec la tête et le cou en extension complète, appliquer une petite quantité de lubrifiant hydrosoluble et insérer à l'envers la canule de Guedel pour voies respiratoires dans la bouche du patient (la face interne de la canule en regard du sommet de la tête du patient).
3. Lorsque le contact se fait avec le palais dur, faire tourner la canule de 180° tout en la faisant progresser, cela permet de s'assurer que la langue est retenue.

Chez les patients pédiatriques, la canule de Guedel pour voies respiratoires peut être insérée « à l'endroit » afin d'éviter de pousser la langue vers le pharynx.

ATTENTION

- À retirer quand le réflexe nauséux réapparaît.
- Peut être utilisées pendant 24 heures.

DE

Der oropharyngeale Flexicare Guedel-Luftweg soll den Atemweg eines bewusstlosen Patienten freihalten, indem er verhindert, dass die Zunge zurückfällt und sich die Kiefer schließen.

Nicht bei bewussten oder halbbewussten Patienten anwenden, wenn der Würgereiz vorhanden ist.

1. Die geeignete Länge des Guedel-Luftwegs kann anhand der Entfernung vom Nasenloch bis zum Ohrknorpel des Patienten oder anhand des Kieferwinkels geschätzt werden.
2. Patient muss sich mit vollständig gestrecktem Kopf und Hals in Rückenlage befinden. Eine kleine Menge wasserlösliches Gleitmittel auf den Guedel-Luftweg auftragen und den Guedel-Luftweg auf den Kopf gedreht in den Mund des Patienten einführen (so dass die Innenkurve zum Scheitel des Patienten zeigt).
3. Bei Kontakt mit den harten Gaumen den Luftweg um 180° drehen, während er vorgeschoben wird, und dabei gewährleisten, dass die Zunge gesichert wird.

Bei Kindern kann der Guedel-Luftweg möglicherweise mit der „richtigen Seite nach oben“ eingeführt werden, damit die Zunge nicht in Richtung Rachen geschoben wird.

ACHTUNG

- Entfernen, wenn der Würgereiz zurückkehrt.
- Für eine Anwendung von bis zu 24 Stunden geeignet.

LENGTH (CM)	SIZE	BITE BLOCK COLOUR
4	000	Pink
5	00	Blue
6	0	Black
7	1	White
8	2	Green
9	3	Orange
10	4	Red
12	5	Yellow

LONGUEUR (CM)	TAILLE	COULEUR DE LA PIÈCE DE MORSURE
4	000	Rose
5	00	Bleu
6	0	Noir
7	1	Blanc
8	2	Vert
9	3	Orange
10	4	Rouge
12	5	Jaune

LÄNGE (CM)	GRÖSSE	BEISSBLOCKFARBE
4	000	Rosa
5	00	Blau
6	0	Schwarz
7	1	Weiß
8	2	Grün
9	3	Orange
10	4	Rot
12	5	Gelb

CZ

Orofaryngeální vzduchovod Flexicare Guedel je určen k udržování průchodu vzduchu u pacienta v bezvědomí tím, že brání zapadnutí jazyka a zavření čelisti.

Nepoužívejte u pacientů při vědomí nebo v částečném bezvědomí, u nichž může být přítomen dávivý reflex.

1. Vhodnou délku vzduchovodu Guedel lze odhadnout podle vzdálenosti od nosní dírký k ušnímu lalůčku pacienta nebo podle úhlu čelisti.
2. U pacienta v poloze vleže na zádech s úplné vzpřímenou hlavou a nataženým krkem naneste na vzduchovod Guedel malé množství lubrikantu rozpustného ve vodě a zasuňte ho do úst pacienta horní stranou dolů (s vnitřním zakřivením obráceným k temenu pacientovy hlavy).
3. Až se bude vzduchovod dotýkat tvrdého patra, během posunování ho otočte o 180° a ujistěte se, že jazyk je zajištěn na místě.

U pediatrických pacientů je možné vkládat vzduchovod Guedel „pravou stranou nahoru“, aby nedošlo k zatlacení jazyka k hltanu.

POZOR

- Při obnovení dávivého reflexu vyjměte vzduchovod.
- Vhodný k používání po dobu až 24 hodin.

NL

De Flexicare Guedel orofaryngeale luchtweg is bestemd voor het handhaven van de luchtweg van een bewusteloze patiënt door te voorkomen dat de tong achterwaarts valt en de kaken sluiten.

Niet gebruiken bij patiënten die bij bewustzijn zijn of half bewusteloos als een kokhalsreflex aanwezig is.

1. De geschikte lengte van de Guedel Airway kan worden geschat aan de hand van de afstand van het neusgat van de patiënt tot de oorlel, of de kaakhoek.
2. Terwijl de patiënt achterover ligt met hoofd en hals geheel gestrekt, past u een kleine hoeveelheid in water oplosbaar lubricans toe en plaatst u de Guedel Airway met de bovenzijde omlaag in de mond van de patiënt (in de bocht tegenover de bovenzijde van het hoofd van de patiënt).
3. Als contact is gemaakt met het harde gehemelte draait u de Airway 180° door als deze is ingebracht, zodat u zeker weet dat de tong goed vastzit.

Bij kinderen kan de Guedel Airway "met de goede kant boven" worden geplaatst, om te voorkomen dat de tong in de richting van de keel wordt gedrukt.

VOORZICHTIG

- Verwijderen als de kokhalsreflex terugkomt.
- Geschikt voor gebruik gedurende tot 24 uur.

IT

La Cannula orofaringea di Guedel prodotta da Flexicare è studiata per mantenere la pervietà delle vie aeree del paziente non cosciente, impedendo la caduta della lingua all'indietro e la chiusura delle mandibole.

Non utilizzare in pazienti coscienti o semicoscienti, quando è presente il riflesso della deglutizione.

1. La lunghezza ideale della Cannula di Guedel può essere stimata in base alla distanza fra la narice del paziente e il lobo dell'orecchio o l'angolo mandibolare.
2. Con il paziente in posizione supina e con il capo e il collo in estensione totale, applicare un piccolo quantitativo di lubrificante idrosolubile e inserire la Cannula di Guedel nella bocca del paziente procedendo dall'alto verso il basso (la curva interna deve essere rivolta verso la parte superiore del capo del paziente).
3. Quando si arriva a contatto con il palato duro, ruotare la cannula di 180° facendola avanzare, in modo che la lingua resti aderente al palato.

In pazienti pediatrici, la Cannula di Guedel può essere inserita "dal lato destro in su" per evitare di spingere la lingua contro la faringe.

ATTENZIONE

- Togliere la cannula quando viene ristabilito il riflesso della deglutizione.
- Utilizzabile fino a 24 ore.

PL

Rurka ustno-gardłowa Guedela firmy Flexicare służy do utrzymania drożności dróg oddechowych u nieprzytomnego pacjenta poprzez zapobieganie opadnięciu języka ku tyłowi oraz zamknięciu szczęki.

Nie używać u pacjentów przytomnych lub półprzytomnych, kiedy występuje odruch wymiotny.

1. Odpowiednią długość rurki Guedela można oszacować na podstawie odległości od nozdrza pacjenta do płatka ucha lub kąta żuchwy.
2. Kiedy pacjent znajduje się w pozycji leżącej na plecach z głową odchyloną do tyłu, nanieść niewielką ilość lubrykantu na bazie wody i włożyć rurkę Guedela do ust pacjenta w pozycji odwrotnej do docelowej (stroną wewnętrznej wygięcia do góry głowy pacjenta).
3. Po dojściu do podniebienia twardego przekreślić wsuniętą rurkę o 180°, upewniając się, że język został zabezpieczony.

U pacjentów pediatrycznych rurkę Guedela można wsunąć od razu w pozycji docelowej (bez przekręcania), aby uniknąć popychania języka w stronę gardła.

UWAGA

- Wyjąć, kiedy powróci odruch wymiotny.
- Nadać się do użytku przez maksymalnie 24 godziny.

TR

Flexicare Guedel Orofaringeal Solunum Yolu bilincini kaybetmiş bir hastanın solunum yolunu dilin geriye düşmesini ve çenenin kapanmasını engelleyerek açık tutmak için tasarlanmıştır.

Öğürme refleksi mevcut olan, bilinci tamamen veya yarı açık hastalarda kullanmayın.

1. Guedel Solunum Yolunun kullanma uygun uzunluğu hastanın burun deliğinden kulak memesine olan mesafe veya çenenin açısı kullanılarak hesaplanabilir.
2. Hasta yatay konumda ve baş ile boyun tamamen uzatılmış durumda iken, az miktarda, suda çözünür bir kayganlaştırıcı kullanarak Guedel Solunum Yolunu hastanın ağzının içine yukarıdan yerleştirin (hastanın başının üst kısmına bakan eğimli kısmın içine).
3. Sert damağa temas edilmediğinde solunum yolunu 180° döndürerek ilerletin ve dilin güvenli bir konumda kalmasını sağlayın.

Pediatrik hastalarda Guedel Solunum Yolu dilin farenkse doğru bastırmasını engellemek için "sağ tarafı üstte bakacak şekilde" yerleştirilir.

DIKKAT

- Öğürme refleksi geri geldiğinde çıkarın.
- 24 saate kadar kullanın için uygundur.

DĚLKA (CM)	VELIKOST	BARVA ZAKUSOVACÍHO BLOKU	LENGTE (CM)	MAAT	BIJTBLOKKLEUR	LUNGHEZZA (CM)	MISURE	COLORE DEL BLOCCA-MORSO	DLUGOŚĆ (CM)	ROZMIAR	KOLOR ZABEZPIECZENIA PRZED PRZYGRYZIENIEM	UZUNLUK (CM)	BOYUT	ISIRMA BLOĞU RENGİ
4	000	Růžová	4	000	Roze	4	000	Rosa	4	000	Różowy	4	000	Pembe
5	00	Modrá	5	00	Blauw	5	00	Blu	5	00	Niebieski	5	00	Mavi
6	0	Černá	6	0	Zwart	6	0	Nero	6	0	Czarny	6	0	Siyah
7	1	Bílá	7	1	Wit	7	1	Bianco	7	1	Biały	7	1	Beyaz
8	2	Zelená	8	2	Groen	8	2	Verde	8	2	Zielony	8	2	Yeşil
9	3	Oranžová	9	3	Oranje	9	3	Arancione	9	3	Pomarańczowy	9	3	Turuncu
10	4	Červená	10	4	Rood	10	4	Rosso	10	4	Czerwony	10	4	Kırmızı
12	5	Žlutá	12	5	Geel	12	5	Giallo	12	5	Żółty	12	5	Sarı

RU

GR

ES

PT

IN

Орофарингеальный воздуховод Гвела Flexicare предназначен для поддержания проходимости дыхательных путей у больного в бессознательном состоянии, а также для предотвращения западения языка и закрытия челюстей.

Не используйте устройство для пациентов в сознании или в полубессознательном состоянии, если присутствует рвотный рефлекс.

- Нужная длина воздуховода Гвела рассчитывается по расстоянию от ноздри до мочки уха пациента или по челюстному углу.
- Пациент должен находиться в положении лежа, голова должна лежать прямо, шея — быть полностью вытянутой. Нанесите небольшое количество водорастворимой смазки и вставьте воздуховод Гвела в рот пациенту в перевернутом положении (внутренний изгиб обращен к макушке головы пациента).
- При контакте устройства с твердым небом поверните воздуховод на 180° в процессе продвижения. Следите за тем, чтобы язык был зафиксирован.

При установке воздуховода Гвела детям его можно вводить «лицевой стороной вверх», чтобы язык не был прижат к глотке.

ВНИМАНИЕ!

- При восстановлении рвотного рефлекса вытаскийте устройство.
- Подходит для использования в течение максимум 24 часов.

Ο στοματοφαρυγγικός αεραγωγός Guedel της Flexicare προορίζεται για τη διατήρηση του αεραγωγού αναισθητού ασθενούς, αποτρέποντας το γύρισμα της γλώσσας και το κλείσιμο των σιαγώνων.

Να μη χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν πλήρως ή μερικώς τις αισθήσεις τους, καθώς μπορεί να παρουσιάσουν αντανακλαστικό εξεμέσεως.

- Το κατάλληλο μήκος του αεραγωγού Guedel μπορεί να υπολογιστεί από την απόσταση από τον ρώθωνα έως το λοβίο του ωτός του ασθενούς ή από τη γωνία της σιαγόνας.
- Έχοντας τον ασθενή σε ύπτια θέση και το κεφάλι και τον αυχένα σε πλήρη έκταση, εφαρμόστε μικρή ποσότητα υδατοδιαλυτού λιπαντικού και εισαγάγετε τον αεραγωγό Guedel αναστραμμένο μέσα στο στόμα του ασθενούς (το εξωτερικό της καμπύλης να είναι στραμμένο προς το άνω τμήμα του κεφαλιού του ασθενούς).
- Όταν έρθει σε επαφή με τη σκληρή υπέρυψ, περιστρέψτε τον αεραγωγό κατά 180° ενώ τον προωθείτε, διασφαλίζοντας ότι η γλώσσα έχει στερεωθεί.

Σε παιδιατρικούς ασθενείς, ο αεραγωγός Guedel μπορεί να εισαχθεί με την επιφάνεια κάτω προς τα πάνω, προκειμένου να αποφευχθεί η απόθληση της γλώσσας προς τον φάρυγγα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφαιρέστε όταν επανέλθει το αντανακλαστικό εξεμέσεως.
- Κατάλληλο για χρήση έως και 24 ώρες.

La cánula orofaríngea Guedel de Flexicare está diseñada para mantener las vías respiratorias de los pacientes inconscientes evitando que la lengua caiga hacia dentro y la mandíbula se cierre.

No la utilice en pacientes conscientes o semiconscientes cuando el reflejo nauseoso exista.

- La longitud apropiada de la cánula Guedel puede calcularse por la distancia entre la fosa nasal y el lóbulo de la oreja del paciente o según el ángulo de la mandíbula.
- Coloque al paciente en posición supina con la cabeza y el cuello completamente extendidos, aplique una pequeña cantidad de lubricante soluble en agua e inserte la cánula de Guedel al revés en la boca del paciente (la curva interior debe apuntar hacia la parte superior de la cabeza del paciente).
- Cuando haga contacto con la parte dura del paladar, rote la cánula 180° mientras avanza, asegurándose de que la lengua esté fija.

En pacientes pediátricos, la cánula de Guedel puede insertarse sin dar la vuelta para evitar empujar la lengua contra la faringe.

CUIDADO

- Retirar cuando se recupere el reflejo nauseoso.
- Apropiado para el uso hasta 24 horas.

O tubo orofaríngeo da Flexicare destina-se a manter desobstruídas as vias aéreas de um paciente inconsciente, impedindo a língua de cair para trás e os maxilares de fechar.

Não utilizar em pacientes conscientes ou semiconscientes, caso exista a possibilidade de ocorrer reflexo de vômito.

- O tamanho adequado do tubo orofaríngeo pode ser calculado com base na distância entre as narinas do paciente e o lóbulo da orelha, ou o ângulo do maxilar.
- Com o paciente na posição de supino e a cabeça e o pescoço completamente estendidos, aplique uma pequena quantidade de lubrificante solúvel em água e introduza o tubo orofaríngeo na boca no cliente, em posição invertida (com a curva interior voltada para a parte superior da cabeça do paciente).
- Quando for estabelecido contacto com o palato duro, rode o tubo orofaríngeo em 180° à medida que avança, garantindo assim que a língua fica segura.

Em pacientes pediátricos, o tubo orofaríngeo para vias aéreas pode ser inserido com o lado "correto" para cima, de forma a evitar empurrar a língua em direção à faringe.

CUIDADO

- Remover quando o reflexo de vômito voltar a ocorrer.
- Adequado para utilização até 24 horas.

Saluran napas Orofaringeal Guedel yang diproduksi oleh Flexicare ditujukan untuk menjaga saluran napas pasien yang sedang dalam keadaan tidak sadar dengan mencegah lidah jatuh ke belakang dan rahang menutup.

Jangan gunakan pada pasien sadar atau semi-sadar saat ditemukan refleks muntah.

- Panjang alat Guedel Airway yang sesuai dapat diperkirakan dari jarak antara lubang hidung dan cuping telinga, atau sudut rahang pasien.
- Dengan posisi pasien telentang serta kepala dan leher terbuka lebar, oleskan sedikit pelumas larut air dan masukkan Guedel Airway dengan posisi terbalik (lengkung dalam menghadap bagian atas kepala pasien).
- Saat bersentuhan dengan langit-langit keras, putar alat dengan sudut sebesar 180° sembari mendorongnya maju, memastikan lidah tetap berada di tempatnya.

Untuk pasien anak, alat Guedel Airway dapat dimasukkan dengan "bagian kanan menghadap ke atas" untuk menghindari lidah terdorong ke faring.

PERINGATAN

- Lepas saat refleks muntah kembali.
- Baik untuk digunakan sampai 24 jam.

ДЛИНА (CM)	РАЗМЕР	ЦВЕТ ПРИКУСНОГО БЛОКА	ΜΗΚΟΣ (CM)	Μέγεθος	ΧΡΟΜΑ ΣΤΟΜΑΤΩΔΙΑΣΤΟΛΕΑ	LONGITUD (CM)	TAMAÑO	COLOR DE LA PIEZA DE MORDIDA	COMPRIMENTO (CM)	TAMANHO	COR DA BASE	PANJANG (CM)	UKURAN	WARNA BLOK GIGIT
4	000	Розовый	4	000	Ροζ	4	000	Rosa	4	000	Cor-de-rosa	4	000	Merah Muda
5	00	Синий	5	00	Μπλε	5	00	Azul	5	00	Azul	5	00	Biru
6	0	Черный	6	0	Μαύρο	6	0	Negro	6	0	Preto	6	0	Hitam
7	1	Белый	7	1	Λεππο	7	1	Bianco	7	1	Branco	7	1	Putih
8	2	Зеленый	8	2	Πράσινο	8	2	Verde	8	2	Verde	8	2	Hijau
9	3	Оранжевый	9	3	Πορτοκαλί	9	3	Naranja	9	3	Cor de laranja	9	3	Oranye
10	4	Красный	10	4	Κόκκινο	10	4	Roj	10	4	Vermelho	10	4	Merah
12	5	Желтый	12	5	Κίτρινο	12	5	Amarillo	12	5	Amarelo	12	5	Kuning

JP

Flexicare (フレキシケア) ゲデル口咽頭エアウェイは、意識のない患者の舌が沈下し、顎が閉じるのを防止することで、患者の気道を確保することを目的としています。

意識のある患者、または意識は完全に回復していないが咽頭反射のある患者には使用しないでください。

1. ゲデルエアウェイの最適な長さは、患者の鼻孔から耳たぶまで、または下顎角までの長さから推定することができます。
2. 患者を仰臥位にして、頭部と頸部を完全に伸展させ、少量の水溶性潤滑剤を塗布し、ゲデルエアウェイを患者の口に逆向きに（カーブの内側が患者の頭頂部を向くように）挿入します。
3. 破口蓋に接触したら、エアウェイを180度回転させながら押し進め、必ず、舌が固定されているようにします。

小児患者では、舌を咽頭に押し込まないようにするために、ゲデルエアウェイを「正しい方を上にして」挿入することもできます。

注意

- 咽頭反射が回復した場合は撤去してください。
- 24時間までの使用に適しています。

KO

Flexicare Guedel 구인두 기도기는 혀가 뒤로 넘어가고 턱이 닫히는 것을 막아 의식이 없는 환자의 기도를 유지하기 위한 용도입니다.

의식이 있거나 반의식 상태의 환자에게는 구토 반사가 있을 시 사용하지 마십시오.

1. 적절한 Guedel 기도기 길이는 환자의 콧구멍에서 귓불까지, 또는 하악각까지입니다.
2. 환자가 바로 누운 자세에서 머리와 목을 완전히 편 후, 소량의 수용성 윤활제를 바른 Guedel 기도기를 거꾸로 하여(내부 만곡부가 환자 머리 위로 향하도록) 환자 입안에 삽입합니다.
3. 경구개(단단입천장)에 닿으면 기도기를 180° 회전하면서 밀어 넣어 혀를 고정합니다.

소아 환자의 경우, 혀가 인두 방향으로 밀리는 것을 막기 위해 Guedel 기도기를 "뒤집지 않고" 삽입할 수도 있습니다.

주의 사항

- 구토 반사가 다시 시작되면 기도기를 제거하십시오.
- 최대 24시간까지 사용할 수 있습니다.

RO

Canula orofaringiană Guedel Flexicare este destinată menținerea liberă a căilor respiratorii ale pacientului inconștient, împiedicând retragerea limbii și închiderea gurii.

A nu se utiliza în cazul pacienților conștienți sau semiconștienți care prezintă reflex faringian.

1. Lungimea corectă a canulei Guedel poate fi estimată în funcție de distanța dintre nara și lobul urechii pacientului sau în funcție de degetul maxilarului.
2. Cu pacientul în poziție supină și capul și gâtul în hiperextensie, aplicați o cantitate mică de lubrifiant solubil în apă și introduceți canula Guedel în gura pacientului în poziție răsturnată (concavitatea orientată spre vârful capului pacientului).
3. Când atingeți palatul dur, rotiți canula la 180° după ce ați avansat suficient, asigurându-vă că limba este fixată.

În cazul copiilor, canula Guedel poate fi introdusă în poziție nerăsturnată pentru a evita împingerea limbii către faringe.

ATENȚIE

- Îndepărtați canula în caz de reflex faringian.
- Perioadă de utilizare de până la 24 ore.

flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE



STERILE EO



Product is not made with Phthalate DEHP



Product is not made with natural rubber latex



長さ (cm)	サイズ	バイトブロックの色
4	000	ピンク
5	00	青
6	0	黒
7	1	白
8	2	緑
9	3	橙
10	4	赤
12	5	黄

길이 (cm)	크기	바이트블럭 색상
4	000	분홍색
5	00	파란색
6	0	검은색
7	1	흰색
8	2	녹색
9	3	주황색
10	4	빨간색
12	5	노란색

LUNGIME (CM)	DIMENSIUNE	CULOARE PIESĂ PENTRU GURĂ
4	000	Roz
5	00	Albastru
6	0	Negru
7	1	Alb
8	2	Verde
9	3	Portocaliu
10	4	Roșu
12	5	Galben



Flexicare Medical Limited.

Cynon Valley Business Park,
Mountain Ash,
CF45 4ER, UK.

☎ +44 (0)1443 474647

☎ +44 (0)1443 474222

✉ enquiries@flexicare.com

🌐 www.flexicare.com

FC3171
VP5400-98
072016